

歯科医院様にお届けください

下記事項はポリカーボネート樹脂で作った義歯のトラブル回避の為の注意事項です。

義歯材料の記録のお願い。

現在、熱可塑性の樹脂は弊社をはじめ他社メーカー様より様々な材質、商品名で販売されております。

※ 材質によって、修理やリライニングの方法、使用する材料が異なります。

歯科医院様におきましては後日の修理及びリライニングを円滑に行なうため、使用材料名をカルテ等に記録することをお勧めします。

使用材料名

「ハイ・ポリカーボネート・樹脂」

「バイオ・カーボ・樹脂」

注意事項 ※変形及びクラックの原因になる恐れがありますので下記の行為は避けて下さい。

(1) オートクレーブ (121℃/135℃) には入れないで下さい。 (変形の原因)

(2) 瞬間接着剤用の硬化スプレーは使用しないで下さい。 (クラックの原因)

(3) ルージュ除去液は使用しないで下さい。 (クラックの原因)

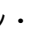
(4) 技工所での製作時には必ず熱処理 (アニーリング) をして下さい。

(即時重合レジンや各種プライマーを使用した際にクラックが発生する場合があります。)

義歯の修理について

・即時重合レジンによる修理はもちろん、床交換法、裏装法 (リライニング法) による修理が可能です。

・口腔内用リライニング材は、全て使用可能です。

※ 補強線を入れる場合はデンケン・ハイデンタル「補強芯」 をご使用下さい。

使用可能な薬品および洗剤

・石膏溶解液

・家庭用洗剤

・歯科用洗浄剤

使用可能な入れ歯洗浄剤

○**歯科医院販売専用の中性義歯洗浄剤を最も推奨します**

- ・部分入れ歯用パーシャルデント (小林)
- ・たばこタフデント (小林)
- ・除菌ができるポリデント (アース)
- ・ニオイを防ぐポリデント (アース)
- ・着色ヨゴレを落とすポリデント (アース)
- ・スモーカーズポリデント (アース)
- ・酵素入りポリデント (アース)
- ・スカイデント (マザーズ)

使用できない入れ歯洗浄剤

- ・デントエラック (ライオン)
- ・部分入れ歯用ポリデント (アース)
- ・ピカ (松風)

※入れ歯にひび割れが入る場合があります。
必ず左記の製品をご使用下さい。