

立ち上がり時間が速く、温水・スチームの連続使用が可能!

スチーム式脱ろう装置

ジェット クリーン

Steam Dewaxing Machine

JET CLEAN



デンケン・ハイデンタル 株式会社  
DENKEN-HIGHDENTAL Co., Ltd.

## 特長

### 速い立ち上がり時間

電源ON後、約15分で温水タンクの温度が使用可能な温度になります。

### 深い処理槽

処理槽が深いので、ノズルガン作業中の温水/スチームの飛び散りが少なくなります。

### 処理槽内の均質なスチーム

8カ所のスチーム出口により処理槽内のスチームが均質に分布。



### 脱口ウスケジュールを記憶

脱口ウ処理に応じて、4種類のスチーム吐出時間を設定。

### 水やワックスに強い操作部 (誤操作を防ぐ収納式)

操作部のスイッチは防水型。さらに透明のスイッチカバーを取り付けることにより、ワックス等の固着による動作不良を防ぎます。



### オプションで給水装置をご用意

水道水の使用が出来ない設置環境では、30Lタンクの給水装置をオプションでご用意しています。

### オプション (30L 給水装置)



### 仕様


販売名	ジェットクリーン JET CLEAN
型式	DH-JC120
電源電圧	AC200V ±10% 単相 50/60Hz
消費電力	3.9kVA
給水	水道水からの自動給水 または「30L給水装置(オプション)」
水道水圧力	0.2MPa~0.6MPa
外形寸法	590(W)×950(H)×441(D)mm
処理槽寸法	477(W)×225(H)×357(D)mm
質量	52.5kg
使用環境	温度 5~40℃、湿度 10~95%RH(結露の無いこと) 標高 2000m以下、屋内使用

コース数	4コース
プログラム時間	10秒~99分50秒、10秒単位
処理フラスコ数	ドリムフラスコ 最大12個
温水タンク容量	10L
温水タンク温度	120℃
立ち上がり時間	約15分
オプション	30L給水装置
付属品	取扱説明書 1冊 給水ホース 1本(5m) 保証書/封筒 1組 蛇口部品 1個 作業用手袋 1双 蛇口アダプター 1個 20Lゴミ袋 1個(10枚入) ホースバンド 2個 マグネットフック 1個 フットスイッチ 1個 ノズルガン 1個 処理槽底板 3枚 排口ウ槽 1個





### 温水/スチームの連続使用が可能

温水タンクの温度低下が少ないため、温水/スチームによる流口ウ作業を連続して行えます。

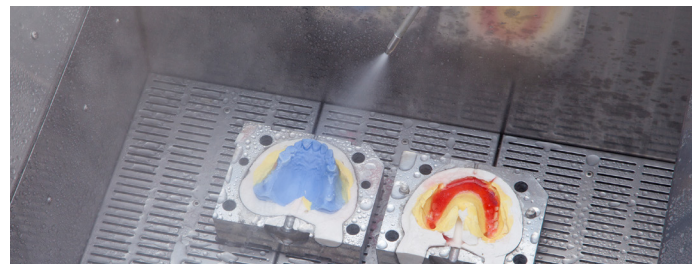

### 温水/スチームを1本に集約したノズルガン

温水/スチームを1本のノズルガンに集約し、フットスイッチの操作により、温水/スチームを個別または混合して吐出することが可能です。

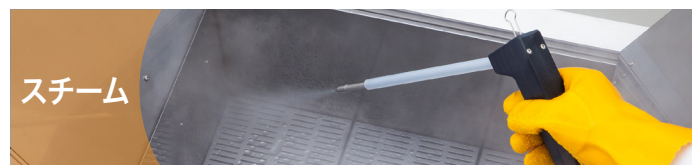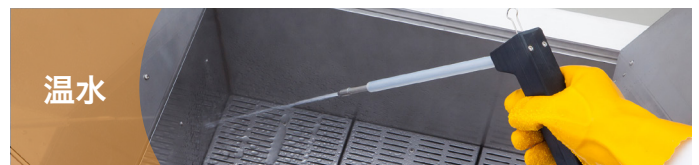

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。

製造販売元 製造販売業 許可番号 26B2X10018



エア・ウォーターグループ  
**デンケン・ハイデンタル株式会社**

本社：京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店 東日本営業所 九州営業所

☎075-672-2118 ☎03-3969-8000 ☎092-710-5360

代理店