



DENKEN-HIGHDENTAL

Polishing & Steam Dewaxing Products

デンケンハイデンタルの研磨器・スチーム脱ろう装置

義歯製作の生産性向上をサポート

卓上自動研磨器

ハイバレルミニ



HI-BARREL mini Automatic Polishing

もっと早く買えば良かった！の声 No.1^{*1}
1日あたり500円の設備投資で研磨時間を大幅短縮^{*2}

- 回転速度・回転時間をプログラム設定可能
研磨物に合わせて10種のプログラムを250~5,000rpmの範囲で設定可能です。

研磨状態比較

コバルトフレーム

カーボラダム
下処理の後、
約40分研磨



研磨前



研磨後

金属床

アズキャストからの研磨



一次研磨



二次研磨

仕様	
販売名	ハイバレルミニ
型式	DH-HBM500
電源電圧	単相 100V±10% 50/60Hz
消費電力	180VA Max.
外形寸法	W300×D290×H470mm(突起物含まず)
質量	19kg(ボット含まず)
プログラム内容	10コース 0~9 回転数と時間をコース毎にプログラム

一般的名称：歯科用研磨器材 分類：一般医療機器
医療機器届出番号：26B2X10018000036

標準価格 620,000円

^{*1} 当社研磨器シリーズ市販後調査による ^{*2} 年間250日×5年使用で算出

電解研磨器


デン・ピカ

Den・Pika Electrolytic Polishing


使いやすく、導入しやすい低コスト

- 約5分~10分で電解研磨
- 電流値の設定で研磨強さを調整可

デン・ピカ使用前後の比較(Co-Cr合金)

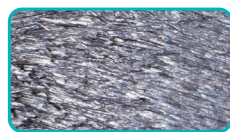

使用前

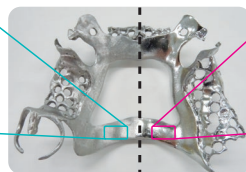

使用后



仕様	型式	デン・ピカ
電源	電 源	AC100V 50/60Hz
外形寸法	外形寸法	W195×D230×H140mm
質量	質 量	約3.0kg

標準価格 95,000円

※別売で電解研磨液(2L 7,000円/20L 40,000円)をお求めください。

循環式オートサンドブラスター アットブラスター




② BLASTER Automatic and Manual Sandblaster

サンドブラストを自動化し、時短を実現しませんか

- 横幅300mmの省スペース設計
- 0.4MPa、約15分で高効率ブラスト

当社従来品に比べ、多くのサンドを吸引して噴出する新ノズル構造により、効率の良いサンドブラस्टングを実現します。

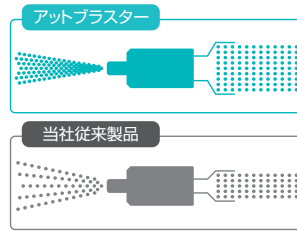

仕様	
販売名	アットブラスター
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
外部エア供給	0.5~1.0MPa
本体寸法	W300×D444×H643mm
質量	約18kg(研磨剤を含まない)
集塵口径	外径38mm
推奨サンド量	6kg(最低4kg)


一般的名称：歯科用研磨器材 分類：一般医療機器
医療機器届出番号：26B2X10018000039

標準価格 580,000円

※別売でサンドブラスター用砂(アルミナ 250μ 3kg 3,100円 / 25kg 20,500円)をお求めください。

【自動サンドブラストの工程例】

割り出し後、埋没材の塊のまま投入 ※スブルーカットすれば、5~6床投入可

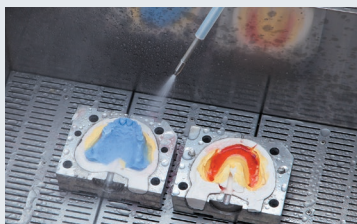

JET CLEAN Steam Dewaxing Machine

脱ロウ作業を もっとクリーンに、シンプルに

- 小型フラスコ約5分で軟化
- 最大99分設定でレジン重合も可能

仕様	
販売名	ジェットクリーン
型式	DH-JC120
電源電圧	AC200V±10% 単相 50/60Hz
消費電力	3.9kVA
給水	水道水からの自動給水 または「30L給水装置(オプション)」
水道水圧力	0.2~0.6MPa
外形寸法	W590×D441×H950mm
処理槽寸法	W477×D357×H225mm
質量	52.5kg

一般的名称：歯科技工用重合装置 分類：一般医療機器
医療機器届出番号：26B2X10018000035

標準価格 980,000円

オプション 30L 給水装置 188,000円

スチーム式 脱ろう装置 ジェットクリーン



※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。※表示価格は2023年4月現在のものです。表示価格には消費税は含まれていません。

製造販売元 製造販売業 許可番号 26B2X10018



エア・ウォーターグループ
デンケン・ハイデンタル 株式会社

本社：京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店

東日本営業所

九州営業所

☎ 075-672-2118

☎ 03-3969-8000

☎ 092-710-5360

代理店