

Products Specification

射出成型器		
販売名	ツインジェット	シングルジェット
型式	DHP-1200T	DHP-1200S
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	10VA	7VA
外形寸法	W450×D280×H602 mm	W275×D280×H602 mm
質量	50.5kg	30kg
射出時間	1秒～9分59秒、10.0分～99.0分、連続	1秒～9分59 秒、10.0分～99.0分、連続
処理ユニット数	2	1
販売名 一般的名称 クラス分類 届出番号 製造販売業者		
ツインジェット 歯科技工用成型器 一般医療機器 26B2X10018000030 デンケン・ハイデンタル株式会社		
シングルジェット 歯科技工用成型器 一般医療機器 26B2X10018000029 デンケン・ハイデンタル株式会社		

溶解器		
販売名	ジェットメルト2	ジェットメルト6
型式	DHM-0200	DHM-0600
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	500VA	1,000VA
外形寸法	W200×D250×H170 mm	W200×D350×H170 mm
質量	6.8 kg	10.4 kg
スロット数	2	6
設定温度範囲	20～340℃ 1℃単位	20～340℃ 1℃単位
タイマー時間	10秒～99分50秒 10秒単位	10秒～99分50秒 10秒単位
販売名 一般的名称 クラス分類 届出番号 製造販売業者		
ジェットメルト2 歯科材料加温器 一般医療機器 26B2X10018000032 デンケン・ハイデンタル株式会社		
ジェットメルト6 歯科材料加温器 一般医療機器 26B2X10018000033 デンケン・ハイデンタル株式会社		

Related Products



販売名	一般的名称	クラス分類	届出番号	製造販売業者
ツインキュア	歯科技工用重合装置	一般医療機器	26B2X10018000028	デンケン・ハイデンタル株式会社

脱ろう/重合器

ツインキュア

効率の良いデンチャーワークを実現

- わずか15分でフラスコ4個の脱ろうを完了
- 分割法、無分割法のフラスコに対応
- 分離材塗布装置・自動乾燥機能を搭載
- 2槽を使用することで、脱ろうと重合を同時処理可能

詳しくはこちら▼



販売名	ツインキュア
型式	DHC-1220
電源電圧	単相200V±10% 50/60Hz
消費電力	3400VA max
提供空気圧力	0.5～0.8MPa
外形寸法	W760×D650×H1120 mm(突起物含まず) W1090×D650×H1120 mm(テーブル付き)
質量	138kg
処理槽数	2槽
フラスコ処理数	1～4個
水の提供	20L供給タンク、または上水接続ユニットによる
コンセント形状	 設置角型 30A 250V WK36301B

詳しくはこちら▼



詳しくはこちら▼



販売名	一般的名称	クラス分類	認証番号	製造販売業者
イソレジン・H	義歯床用アクリル系レジン	管理医療機器	226ACBZX00033000	デンケン・ハイデンタル株式会社
イソレジン・Q	義歯床用アクリル系レジン	管理医療機器	226ACBZX00032000	デンケン・ハイデンタル株式会社

加熱重合レジン

イソレジンH 冷凍室で保管すればモチ状を約1週間キープ

イソレジンQ ヒートショック型レジン(沸騰水中に10分間) にも
マイクロウェーブ重合にも対応

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。



Selection
Guide

DENKEN-HIGHDENTAL
Non-metal-clasp Denture
Manufacturing System

デンケン・ハイデンタルのノンメタルクラスプデンチャーシステム



射出成型ラインを、ラボそれぞれのスタイルで。

ラボの規模や仕事量など製作現場のスタイルに応じて
射出成型設備プランを自由に組み立てることができます。

STEP
01

射出成型器セット(溶解器との組み合わせ)をセレクト

👉 デンケン・ハイデンタルの射出成型器は用途によって射出スピードを選択可能

FAST : 熱可塑性樹脂用の高速射出
SLOW : 加熱重合用の低速射出



射出成型器

シングルジェット

デンケン・ハイデンタルのスタンダードモデル。
機能とコストパフォーマンスに優れた1台を
お求めのテクニシャンにおすすめです。



溶解器

ジェットメルト2



シングルジェット
(2穴ファーンレス付)セット

750,000円



溶解器

ジェットメルト6



シングルジェット
(6穴ファーンレス付)セット

870,000円

左3本、右3本を別々に温度調節可能。



溶解器

ジェットメルト2



シングルジェット
(2穴ファーンレス付)セット

1,350,000円



溶解器

ジェットメルト6



シングルジェット
(6穴ファーンレス付)セット

1,470,000円

左3本、右3本を別々に温度調節可能。



射出成型器

ツインジェット

フラスコ2個を同時にショットできる
仕事量の多いラボ向きモデル。
例えば左右の射出スペースを使い分けし、
「熱可塑性樹脂有床義歯」と
「ノンメタルクラスデンチャー」の
同時製作も可能です。

各セット付属品

・ドリームフラスコ 2個 ・ジェットシリンダー + プレスプレート(底あり) 1個 ・ジェットシリンダー + プレスプレート(底なし) 1個 ・アルミケース(キャップ付) 5 セット
・ジェットアルミ板(M型) 100枚 ・ジェットパッキン(M型) 100枚 ・スルホンストーンS 20kg ・スプルーワックス各種 ・レジンプライマー 1個 など

STEP
02

オプション
をセレクト

Ultra DRY
対応の材料使用
の場合不要!



乾燥器

ジェットオープン

樹脂の乾燥などPID温度制御で正確に行います。

210,000円



シングル
ジェット
成形不良防止!

増圧ユニット

増圧弁付補助タンク(5L)
+ミストセパレーター

エア圧を安定して0.7MPaを確保できない
場合に使用します。

150,000円

STEP
03

追加したい関連機器
をセレクト

ドリームフラスコ

使用する石膏の量が節約できる
内面構造です。2ピース構造(上輪
・下輪)により埋没操作が容易です。

15,000円

射出成型器セット
に2個付属
しています




ジェットシリンダー+プレスプレート(底あり)

アクリ:ジェットなどアルミケースを使用
しない材料用のシリンダーです。

17,600円

射出成型器セットに
1個付属しています。

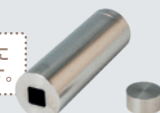


ジェットシリンダー+プレスプレート(底なし)

バイオ:トーン・バイオ:プラストなどアルミ
ケースを使用する材料用シリンダーです。

17,600円

射出成型器セットに
1個付属しています。

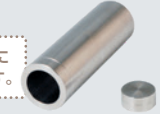

ドリームシリンダー+レジンを押しプレート

モチ状になった加熱重合レジンを
填入するためのシリンダーです。

17,600円



加熱重合レジン用

Materials

義歯床用熱可塑性レジン

熱可塑性義歯床用レジン
アクリ:ジェット

- 高い耐衝撃性
- 優れた適合性
- 高い生体親和性
- 優れた研磨性

#0(クリアー) Ultra DRY #1(クリアーピンク)
#2(ライトピンク) #3(3ピンク)
#7(ライブピンク) Ultra DRY #7α(リアルピンク) Ultra DRY

23,000円 [1kg] Ultra DRY 13,000円 [40g×12袋]

販売名 一般的名称 クラス分類 認証番号 製造販売業者
アクリ:ジェット 義歯床用熱可塑性レジン 管理医療機器 226ACBZX00029000 デンケン・ハイデンタル株式会社

熱可塑性義歯床用レジン
アクリ:トーン

- 扱いやすい
- …… レジン床のように研磨が容易なだけでなく
修理もプライマーなしで即時重合レジンで可能

#0(クリアー) Ultra DRY #1(クリアーピンク)
#2(ライトピンク) #3(3ピンク)
#7(ライブピンク) #7α(リアルピンク) Ultra DRY

26,000円 [1kg] Ultra DRY 10,800円 [30g×12袋]

販売名 一般的名称 クラス分類 認証番号 製造販売業者
アクリ:トーン 義歯床用熱可塑性レジン 管理医療機器 226ACBZX00031000 デンケン・ハイデンタル株式会社

ノンメタルクラス用樹脂

熱可塑性義歯床用レジン
バイオ:トーン

- しなやかさ…… 柔軟性と強度を両立
- 審美性…… 専用プライマーでクリアーム
デンチャーへの応用も可能
- 修理が容易…… 専用プライマーで即時重合レジン
などの補修材料と接着可能

#0(クリアー) Ultra DRY #7α(リアルピンク) Ultra DRY
#OR(オリジナル)

26,000円 [1kg] Ultra DRY 10,800円 [30g×12袋]

販売名 一般的名称 クラス分類 認証番号 製造販売業者
バイオ:トーン 義歯床用熱可塑性レジン 管理医療機器 226ACBZX00030000 デンケン・ハイデンタル株式会社

熱可塑性義歯床用レジン
バイオ:プラスト


- 超弾性…… 柔らかさを求める症例に
適した高い弾性
- 審美性…… 専用プライマーでクリアーム
デンチャーへの応用も可能

#7α(リアルピンク)

28,000円 [1kg]

販売名 一般的名称 クラス分類 認証番号 製造販売業者
バイオ:プラスト 義歯床用熱可塑性レジン 管理医療機器 226ACBZX00063000 デンケン・ハイデンタル株式会社

[Material MAP]

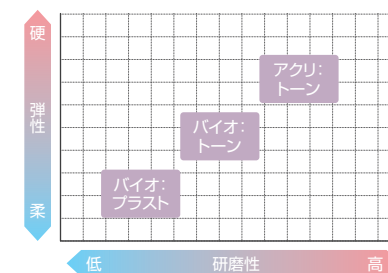

Ultra DRY

事前乾燥の必要がないラインナップもございます。